

Alles hygienisch – vom Arbeitsplatz bis Zubehör



Zubehör Programmübersicht



Mit MEIKO zur perfekten Rundum-Hygiene



MEIKO – die saubere Lösung. Das ist neben einem Portfolio von professionellen Reinigungs- und Desinfektionsgeräten ein komplettes Zubehörprogramm. Von Oberflächen- und Arbeitsplattenmaterialien in verschiedenen Farben, über Gerätezubehör wie Halterungssysteme oder Kommunikationsinstrumente, bis hin zu Schränken und Regalen. Für die perfekte Rundum-Hygiene.

**Vielseitig und hygienisch gestaltet:
der Pflegearbeitsplatz**



Vom Einzelgerät bis zum komplett eingerichteten Arbeitsraum. Individuelle und flexible Lösungen: Arbeitsflächen, Waschbecken, Schränke, Regale und vieles mehr. Alles was das Arbeiten sicherer, komfortabler und hygienisch funktionaler macht, in bester MEIKO-Edelstahlqualität.

**Pflegeleicht und farblich abgestimmt: HPL-Schichtstoffplatten
oder CORIAN***



Wenn es mal etwas anderes sein soll: HPL – High Pressure Laminates auf Basis thermohärtender Harze homogen mit Zellulosefasern verstärkt. Markant ist die dekorative Oberfläche. Weitere Farben und Muster möglich – auf Anfrage und Aufpreis. Weil harmonisch abgestimmte Farben nachweislich das Arbeitsklima positiv beeinflussen, bieten wir Ihnen unsere Pflegekombinationen auf Wunsch auch in verschiedenen Farben an.

Farbmuster HPL

Melonengelb E2-31	Pastellgrün E23-21
Elfenbein E1-01	Himmelblau E17-30
Sand E3-0	

Auszug der lieferbaren Farben



CORIAN* ist ein Mineralwerkstoff für Arbeitsplatten. Robust, hygienisch und leicht zu pflegen. Schrankober- und -unterbauten können in allen RAL-Farben, matt oder glänzend, spritzlackiert geliefert werden.

Farbmuster CORIAN

Vanilla	Mojave
Raffia	Dusk

Auszug der lieferbaren Farben

* Die abgebildeten Farben können erfahrungsgemäß drucktechnisch nicht originalgetreu wiedergegeben werden

MEIKO Gerätezubehör:
für jeden Fall das Richtige



Für jeden Fall das Richtige - mit Gerätezubehör von MEIKO sind Sie stets gut gewappnet. Hier ist für jedes Pflegegeschirr etwas dabei: ob Universalhalterung oder Spezialhalterungen für Sonderpflegegeschirre. Und das perfekt auf den Einsatz abgestimmte Design ermöglicht nicht nur eine praxisgerechte Handhabung und Arbeitskomfort, sondern garantiert noch Funktionssicherheit und Hygiene.




Kammertür mit seitlichen Spritzblenden zur Verwendung als Ausguss
Kaltwasserspülung über Pumpensystem des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes.



Universalhalter SUH2



Bedarfsorientierte Spezialhalterungen
Zur Vorreinigung von Absaugflasche und Deckel. Entsorgung unter Verschluss.

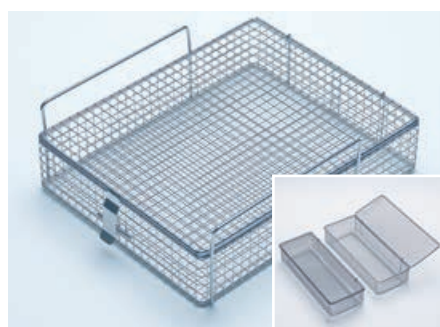

Korb für Kleinteile

Mit Klappdeckel zum Einschieben in den Gefäßhalter (Maschenweite 10 x 10 mm).

Einsatzkorb

Mit Klappdeckel zum Einlegen in den Korb für Kleinteile (Maschenweite 4 x 4 mm).

MEIKO Kommunikationszubehör: für sichere Hygiene





Lückenloser Überblick: *M-Commander InVision*

Sichern Sie sich einen lückenlosen Überblick über Hygiene, Logistik und Technik – mit der Analysesoftware *M-Commander InVision* von MEIKO. Sekundenschnell und übersichtlich werden alle relevanten Daten auf Ihren PC übertragen. Für Transparenz und Sicherheit. Mit MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräten mit *MIKE 2* Elektronik-Steuerung kompatibel.

- erreichter A₀-Wert
- eingestellter A₀-Wert
- Datum und Uhrzeit des Programmstarts
- Zyklusdauer
- Maschinen-Ident-Nr.
- Chargenzähler
- Programm-Nr.
- Temperaturverlauf der Desinfektionsphase
- Online-Überwachung aus der Ferne
- Geräteparameter
- und vieles mehr

Online-Desinfektionsüberprüfung: per Funk-Temperatur-Datenlogger

Überprüfen Sie online den Desinfektionsprozess Ihres Reinigungs- und Desinfektionsgerätes – durch Platzierung eines Funk-Temperatur-Datenloggers durch MEIKO in Ihrem Gerät! Schnell, zuverlässig und nach DIN EN ISO 15883. Für sichere Hygiene.

- die Prozessdaten stehen unverzüglich auf dem Laptop zur Verfügung
- dieser Datensatz wird via LAN oder Funkübertragung sekundenschnell von einem MEIKO-Server überprüft
- bei Korrektheit wird automatisch ein Zertifikat der Überprüfung erstellt
- dieses erhalten Sie umgehend für Ihre Dokumentation und zum Nachweis bei Begehung durch die zuständige Aufsichtsbehörde
- bei fehlerhaften Messungen kann der Servicetechniker vor Ort unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. Ein weiterer Serviceeinsatz wird damit verhindert.
- Sie haben permanenten Zugriff auf die Geräteinformationen und auf die Messdaten
- im Rahmen einer regulären Wartung erhalten Sie alle relevanten Daten für Ihre Geräteakte

Sauber gelöst: von Abdeckblech bis Zulaufverrohrung



Spritzblende für den Ausguss

Hinten und/oder seitlich. Randspülung (optional) über Reinigungs- und Desinfektionsgerät oder Eigenversorgung. Bedienung der Randspülung des Ausgusses über eigene Folientastatur (Eigenversorgung) oder über Gerätesteuerung.



Abdeckblech mit Bügelgriff

Zur Vermeidung von chemischen Gerüchen. Für Einlegebecken 500 mm x 400 mm x 300 mm.



Einhandbatterie, verchromt, mit schwenkbarem Auslauf, komfortabel zu bedienen.



Hebelablaufventil

Ab einer Beckengröße von 500 mm x 400 mm x 300 mm, wahlweise mit Füllstandsmarkierung.



Pflege- und Reinigungsmittel: Spezial-Enthärter und -Klarspüler DOYEN SK 22 E, wahlweise mit Apfelduft

Zur Verhinderung von Kalkablagerungen und für eine tropfenfreie Klarspülung des Waschgutes. Gewährleistet damit auf Dauer gute Reinigungs- und Desinfektionsergebnisse. (5-kg-Gebinde)

Steckbecken-Reiniger DOYEN R 100

Mildalkalisch, reinigt kraftvoll und trotzdem materialschonend bei starker Verschmutzung. (5-kg-Gebinde)

Steckbecken-Reiniger DOYEN RS 120

Säurehaltig, löst zuverlässig Salben- und Fettränder, universell einsetzbar bei allen Wasserhärten. (5-kg-Gebinde)



Zentrale Ablaufverrohrung

Zentralanschluss unter dem Ausguss.



Zulaufverrohrung für Mischbatterien

Zentralanschluss einschließlich Installationswand für Kaltwasser und Warmwasser.



Tischplatte aus Edelstahl mit verschiedenen Wandabschlussprofilen

z.B. mit wandseitiger, gerader Aufkantung oder mit Hygienradius (R15) und wandseitiger, schräger Aufkantung.

Schränke und Regale: für den gepflegten Arbeitsraum



Schränke

z.B. Schrank mit Handwaschbecken, 2 Türen und 4 Schubladen.
In verschiedenen Maßen erhältlich.



Regal TUS

Für desinfizierte Urinflaschen, Bettpfannen und Gefäße mit Abstellrost oder Abtropfwanne in Breiten 500 und 1400mm.

Wandregal

Regal mit höhenverstellbaren Ablagen in allen Breiten (Tiefe 350mm).




Offene Wandschränke

Schränke für die offene Ablage mit jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500, 1000 und 1200mm.



Geschlossene Wandschränke

Schränke mit Schlagtüren und jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500, 600, 800, 1000, 1200 und 1500 mm. (Optional: Lichtblende und Leuchtmittel)

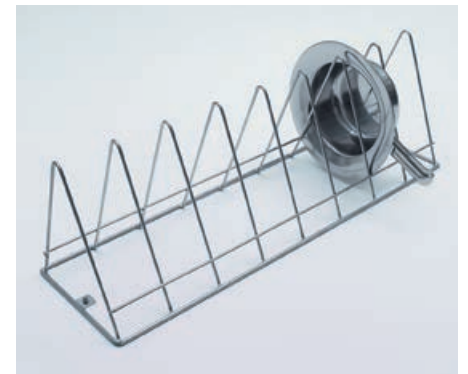

Gestell

Zur senkrechten Aufbewahrung von Steckbecken in Wandschränken.




Abschließbare Schranktür

Gegen unbefugten Zugriff.



Abfallsammler

Edelstahl, geschlossen, im Unterschrank eingebaut, zum bequemen Befüllen mit Kleinmüll.

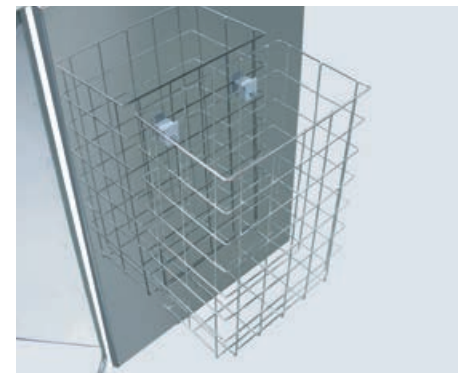

Halterung für Abfallsack (26 Liter)

Im Unterschrank eingebaut, zum bequemen Befüllen mit Kleinmüll.



MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
77652 Offenburg
Germany
Tel.: +49 (0)781 203-0
Fax: +49 (0)781 203-1229
E-Mail: info@meiko.de
www.meiko.de